



信赖. 安全. HEM-O-LOK.®

WECK® Hem-o-lok 聚合物锁定结扎系统。

特性

- 提供安全的结扎，夹锁在血管上
- 触觉反馈
- 永久性，不可吸收，惰性，无毒，射线可透过的聚合物
- 冷却结扎系统
- 开腹或腹腔镜应用

您可以感受到的信心

置信度。这就是WECK Hem-o-lok 聚合物锁定连接系统所提供的功能。设计用于夹子安全的结扎系统产生的信心 - 在施用器中安全，锁定在患者血管上。

安全设计

Hem-o-lok 独特的设计和灵活的铰链使夹子牢固地固定在钳口上。夹子独特的触觉反馈确认了下颌座位和安全的血管放置。

冷却结扎


由于Hem-o-lok是一种很冷却的结扎系统，因此很难将热扩散到重要结构，这是许多外科医生在使用基于能量的结扎解决方案时的共同关注点。

尺寸范围满足您的需求

Hem-o-lok 有各种夹子尺寸（中号，中/大号，大号 and XL型）可通过5 mm 端口连接最多10 mm 容器，或通过10 mm 端口连接最多16 mm 容器。我们广泛的施药器长度（包括45cm内窥镜适用于扩展范围）使外科医生能够提供控制和自信的夹子。



血管/组织束大小范围

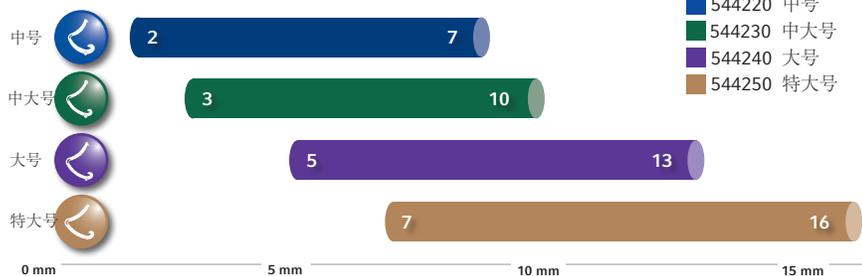

HEM-O-LOK生物夹


■ 544220 中号

■ 544230 中大号

■ 544240 大号

■ 544250 特大号

HEM-O-LOK

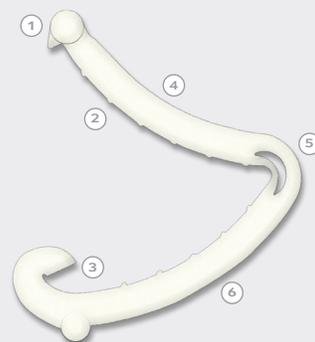

- ① 老板设计用于将夹子固定在钳口上
- ② 集成的齿与容器接口，旨在防止滑动
- ③ 锁定机制提供触觉反馈和安全闭合
- ④ 弓形允许使用适当的仪器移除
- ⑤ 在夹子锁定之前，铰链允许夹子放置的灵活性
- ⑥ 不可吸收的聚合物是惰性的，不导电的，射线可透的，并且不会干扰CT, MRI或X射线诊断

结扎夹	开放手术施夹钳/除夹钳	内镜手术施夹钳/除夹钳	连发自动施夹钳
 M 544220 Hem-o-lok® 中号 聚合物结扎夹 6 夹/条 14 条/盒, 已消毒	544113 8" 微弯 544114 11" 直角 (70°) 544115 11" 微弯 544123 11" 除夹钳 (用于 M, ML, L)		
 ML 544230 Hem-o-lok® 中大号 聚合物结扎夹 6 夹/条 14 条/盒, 已消毒	544170 8" 微弯 544171 11" 微弯 544172 11" 直角 (70°) 544123 11" 除夹钳 (用于 M, ML, L)	Endo5® ML, 杆径5 mm 544965 32.5 cm 施夹钳 544965L 45 cm 施夹钳 544965T 34 cm 施夹钳, 拆开 544121 32 cm 除夹钳 (用于 ML 和 L) 544121L 45 cm 除夹钳 (用于 ML 和 L) 544121T 32 cm 除夹钳, 拆开 (用于 ML 和 L)	543965 Auto Endo5® 15 夹/把, 3 把/盒, 已消毒, 一次性用于内窥镜手术
 L 544240 Hem-o-lok® 大号 聚合物结扎夹 6 夹/条 14 条/盒, 已消毒	544179 11" 直角 (70°) 544180 8" 微弯 544181 11" 微弯 544123 11" 除夹钳 (用于 M, ML, L) 544124 11" 除夹钳 (用于 L, XL)	Endo10™ L 544995 32 cm 施夹钳, 10 mm 544995L 45 cm 施夹钳, 10 mm 544995T 34 cm 施夹钳 10 mm, 拆开 544121 32 cm 除夹钳, 5 mm (用于 ML 和 L) 544121L 45 cm 除夹钳, 5 mm (用于 ML 和 L) 544121T 32 cm 除夹钳, 5 mm, 拆开 (用于 ML 和 L) 544130 32 cm 除夹钳, 10 mm (用于 L 和 XL) 544130L 45 cm 除夹钳, 10 mm (用于 L 和 XL) 544130T 33 cm 除夹钳, 10 mm 拆开 (用于 L 和 XL)	
 XL 544250 Hem-o-lok® 特大号 聚合物结扎夹 6 夹/条 14 条/盒, 已消毒	544191 11" 微弯 544192 11" 直角 (70°) 544124 11" 除夹钳 (用于 L, XL)	Endo10™ XL, 杆径10 mm 544990 32 cm 施夹钳 544990L 45 cm 施夹钳 544990T 34 cm 施夹钳, 拆开 544130 32 cm 除夹钳 (用于 L 和 XL) 544130L 45 cm 除夹钳 (用于 L 和 XL) 544130T 33 cm 除夹钳, 拆开 (用于 L 和 XL)	
无菌托盘		544500 容量: 3 个内窥镜 32 cm 施夹钳 P37319 容量: 2-3 个内窥镜 45 cm 施夹钳	